



MEMO Timer

Manuel

Art. nr: 500150 500155 500160 500165


FR 5.0

Utilisez MEMO Timer

MEMO Timer décompte les intervalles de temps choisis au moyen de points lumineux dans une colonne de temps. Lorsque tous les points sont noirs, le temps est écoulé et l'alarme retentit.

MEMO Timer est conçu pour les personnes qui ont besoin d'aide pour comprendre la durée et le passage du temps. Il est étanche et peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur. La durée de vie estimée de ce produit est de 5 ans. MEMO Timer est durable et peut être laissé tomber pendant une utilisation normale.

À propos de MEMO Timer

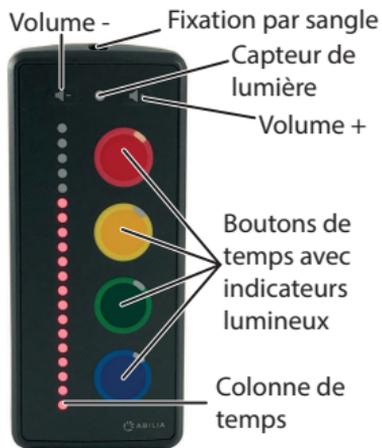

Les boutons de temps sur les différents modèles correspondent aux différents intervalles de minuterie exprimés en minutes.

Boutons de temps	MEMO Timer			
	8	20	60	80
	2	5	15	20
	4	10	30	40
	6	15	45	60
	8	20	60	80

Le capteur de lumière adapte la luminosité des points en fonction de la lumière ambiante. Grâce aux sangles fournies avec le produit, il est possible d'accrocher le MEMO Timer à un crochet ou de le porter autour du cou.




AVERTISSEMENT : Utilisez uniquement les sangles fournies avec des verrous de sécurité pour éviter d'étouffement et autres blessures.

Commencez avec MEMO Timer

Mettre la sangle souhaitée (le cas échéant).

Insérer les piles conformément aux étapes 1-7 :

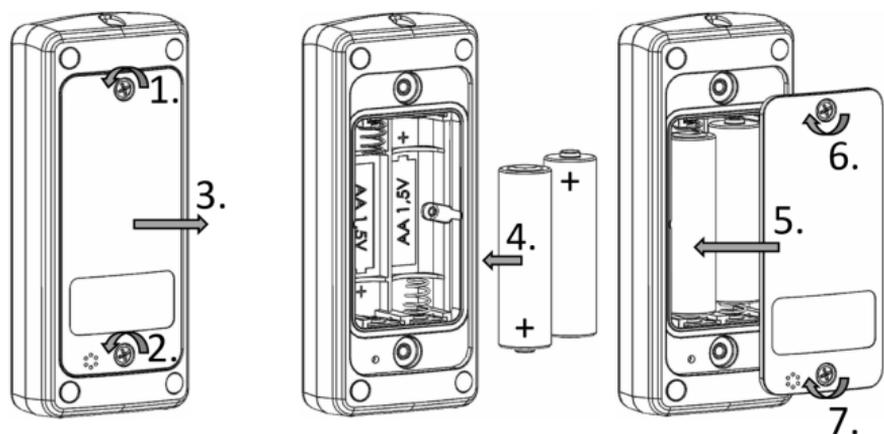

Veiller à ce que le joint du couvercle des piles soit intact et exempt de débris avant de remettre le couvercle en place. Montrer à l'utilisateur comment se servir du produit en toute sécurité.

Entretien et nettoyage

Lorsqu'il est temps de changer les piles, un signal sonore se fait entendre chaque heure. Voir Prise en main pour savoir comment changer les piles.

Nettoyer le produit avec du savon et de l'eau tiède, en utilisant un chiffon doux.

Fonctions et réglages

● = Appuyer simultanément sur les boutons d'heure indiqués et les maintenir enfoncés.

Les réglages par défaut sont indiqués en *italique gras*.

Fonction	Boutons	Information
Démarrer la minuterie	Appuyer sur le bouton de temps qui correspond à l'intervalle de temps voulu, puis le relâcher.	Le nombre de points correspondant s'allument. L'indicateur sur le bouton sélectionné s'allume (si le réglage = « Allumage bouton activé »). Une fois le temps écoulé, l'alarme se déclenche et la colonne lumineuse clignote, accompagné d'un signal et d'une vibration en fonction des réglages.
Arrêter l'alarme	Appuyer sur n'importe quel bouton, puis le relâcher.	L'alarme est désactivée.
Annuler le compte à rebours	● + ● 2 s	Le compte à rebours est interrompu.
Régler le volume de l'alarme	Appuyer sur Volume +/- et relâcher pour augmenter et réduire le volume de l'alarme.	Volume en cinq étapes. 1=silencieux, 5=max (réglage par défaut= 3). Un exemple de signal sera émis à chaque étape. Une vibration annonce l'étape 1 et l'étape 5.

Réglage	Boutons	Information			
Signal d'alarme	2 s	Utilisez Volume +/- pour changer. Le signal est émis à chaque étape.	Alarme 1	Alarme 2	Alarme 3
Vibration	2 s	Utilisez Volume +/- pour changer.	Dés-activé	Activé	Activé en mode silencieux.
Allumage bouton	2 s	Utilisez Volume +/- pour changer.	Dés-activé	Activé	
Luminosité maximale	2 s	Luminosité en cinq étapes. 1=min, 5=max (réglage par défaut = 3). Utilisez Volume +/- pour changer. La luminosité définie est indiquée à chaque étape.			
Quitter le mode de réglage		Les points lumineux clignotent trois fois. Sinon, attendez 10 secondes.			
Verrou	Voir*	Verrouillé = La colonne de temps clignote une fois. Seuls «démarrer la minuterie» et «arrêter l'alarme» sont possibles. Déverrouillé = La colonne de temps clignote deux fois.			
Réinitialiser	2 s	Réinitialisation sur les réglages par défaut.			

* Appuyer et maintenir enfoncé le bouton bleu, tout en appuyant et relâchant successivement le bouton vert, jaune et rouge.

Pièces incluses

- 1 x MEMO Timer
- 1 x Sangle de cou
- 1 x Sangle courte
- 2 x Piles AA de 1,5 V
- Manuel (cette document)

Spécifications du produit

Dimensions H x L x P:	107 x 46 x 25 mm
Poids:	0.12 kg
Pile:	2 x AA 1,5 V
Volume de l'alarme:	80 dB max (1 mètre)
Code IP:	IP67
Plate de température:	-10°C à +40°C

Entreposage et mise au rebut

Retirer les piles si le produit doit être rangé pendant une longue période.



Le produit contient des composants électriques qui doivent être recyclés. Mettez le produit au rebut dans un endroit adapté.

Conformité aux exigences relatives aux appareils médicaux

MEMO Timer est commercialisé comme aide technique pour les personnes atteintes de handicap. Il est conforme à toutes les exigences nécessaires, réglementations et directives pour les appareils médicaux.

Informations importantes



AVERTISSEMENT : Lisez les instructions d'avertissement ci-dessous avant d'utiliser le produit.

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire et comprendre le contenu du présent manuel.
- Utilisez uniquement les sangles fournies avec des verrous de sécurité pour éviter d'étouffement et autres blessures.

Incidents graves

En cas d'incident grave lié au produit, il convient de le signaler au fabricant et à l'autorité compétente du pays. Un incident est considéré comme étant grave s'il a conduit, peut avoir conduit ou peut conduire directement ou indirectement au le décès d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne, à la détérioration grave temporaire ou permanente de l'état de santé du patient, de l'utilisateur ou d'une autre personne ou une menace grave pour la santé publique.

Responsabilité du produit

Le produit a été développé et les risques évalués conformément aux normes ISO 14971 et EN 12182. Le mode d'emploi et les spécifications techniques ont été conçus conformément à l'évaluation de la sécurité dans l'analyse des risques. Respectez toujours les consignes de sécurité lors de l'utilisation du produit. Abilia AB n'assume aucune responsabilité pour les conséquences d'une utilisation ou d'une installation incorrecte du produit. Toute forme d'altération ou d'altération du produit invalide la garantie et décline la responsabilité du fabricant. La durée de vie estimée du produit s'applique lorsqu'il est utilisé conformément à ses instructions d'utilisation et d'entretien prévues.

Pour plus d'informations sur le produit et la dernière version du manuel d'utilisation, rendez-vous sur www.abilia.com.



500150 500155 500160 500165_Manuel_MEMO Timer_FR December 2021

